

2024

ZENAS TECHNOLOGY

CATALOG



SPORTS


HEALTH

CONTACT US






FEEDBACK IN REAL TIME

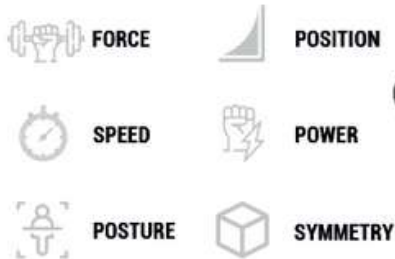


APPLICATION ANDROID TABLET

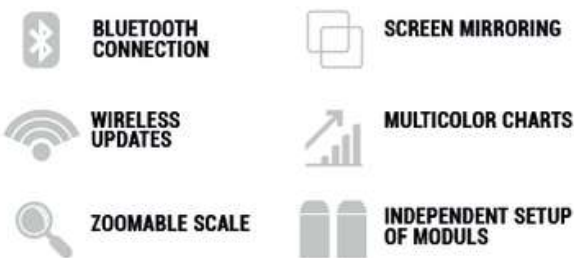

DYNAMIC VECTORING FREEDOM OF MOVEMENT

Thanks to this patented technology, the load of exercise is always perpendicular to the ground or in other directions for any training requirements. It is possible to set a variable angle from 0° to 45°, maintaining

then always constant the vector component, or set a fixed point of the cable exit. This allows you to fit the natural biomechanics of human body.

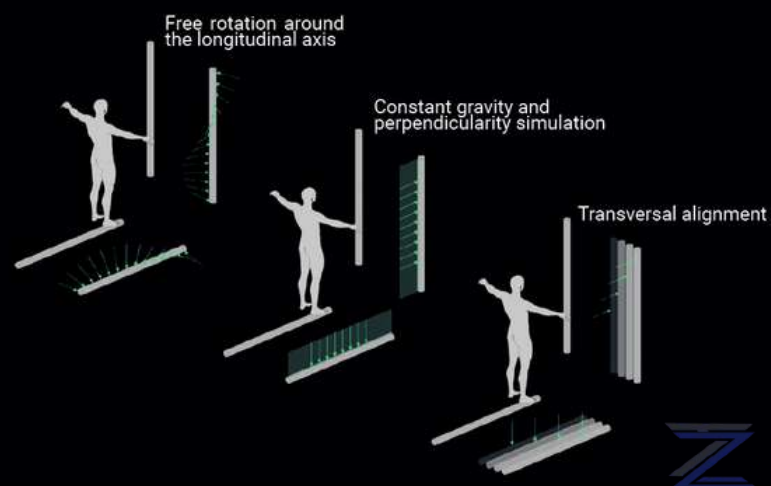

IN VERTICAL SPACE SAVER WORKBASE

The two tubular modules can be **applied directly to a wall**, thanks to the **simple brackets** provided with rapid attachment/detachment.

You can pre-install additional brackets in other environments and use the same modules without limitations.

This configuration allows to easily optimize the space.



SOME VERTICAL WORKOUT EXAMPLES

STANDING
OBLIQUE TWIST



STANDING
LEG ABDUCTION




STANDING
PULLDOWN TRICEPS



SEATED NEUTRAL
GRIP PULLEY ROW



FULL-BODY
THRUSTS

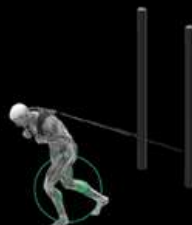

LAT
MACHINE



SOME HORIZONTAL WORKOUT EXAMPLES

LATERAL
RAISES



CHEST
FLY



BICEPS
CURL




LATERAL
LEG ABDUCTION



LEG EXTENSION



JUMP

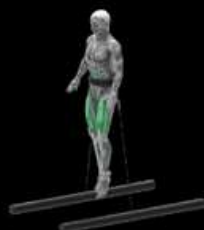

IN HORIZONTAL A SOLID WORKBASE

Thanks to the platform accessory, it is possible to position the **tubular modules horizontally** with the same **rapid** fastening/unfastening system.

In this configuration it is possible to perform multiple exercises in a reduced space (205 X 95 cm), both inside and outside of the platform that has been specifically designed to ensure a solid stability on the ground and sized for a convenient use of any bench or step. It also allows a total accessibility even in cases of users with disabilities.



Sintesi is modular and can also be placed horizontally, thanks to the movable Footboard. The switching requires very few seconds.



LOAD PROFILES

WITH SINTESI YOU CAN SIMULATE MANY WORKING CONDITIONS, PERSONALIZING YOUR TRAINING, AS NEVER BEFORE



CONSTANT LOAD



ECCENTRIC LOAD



AUXOTONIC LOAD



MAGNETIC LOAD



VISCOUS LOAD



ISOKINETIC LOAD



VIBRANT LOAD



GUIDED MOVEMENT LOAD



ISOMETRIC LOAD

CST - The load is always constant and is not affected by the inertial influence of the load.

AUX - it progressively increases the load depending on the extension of the cable, reproducing the same feeling of an elastic with different levels of resistance.

ECC - It allows you to separate the load in the positive phase from the negative one. You can then increase or decrease the load in the eccentric phase.

VSC - The load varies according to the speed of execution, by setting the viscosity of a fluid. It simulates the same functionality of a rowing machine.

ISM - It produces a muscle contraction, even at its top, without any shortening of the muscles and moving of the joint.

VIB - The load varies randomly with adjustable frequency to create instability/imbalance during the operation.

MAG - The load simulates the same magnetic attraction between two magnets that, the more are close to the zero point, the more the magnetic attraction increases.

ISC - The load shows a constant angular velocity motion, regardless of the applied force.

GMT - It sets the load directly with a dynamic curve according to the extension of the cable, by varying the weight in the proximity of specific points.


STRENGTH
HYPERTROPHY



CARDIO



PROPRIOCEPTION
STABILITY

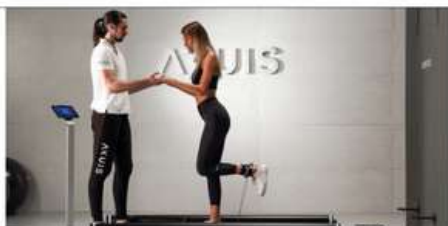

POWER



FUNCTIONAL
TRAINING



SPORT PERFORMANCE
RETURN TO PLAY



TONING
SLIMMING



FUNCTIONAL
RECOVER





D-WALL

อุปกรณ์สำหรับฝึกและประเมินสมรรถภาพทางกาย และการทรงตัวชนิดติดผนังพร้อมวิเคราะห์ผล

- กล้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Motion Analysis)
- แผ่น Force Plate พร้อมโปรแกรมสำหรับประเมิน เช่น Counter&Squat Movement jump Balance หรือ Limit of stability เป็นต้น
- ประเมินผลและแสดงผลแบบ real time
- แสดงค่าตัวแปร เช่น มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ แรงกด การทรงตัวในทิศทางต่างๆ เป็นต้น
- ออกแบบรูปแบบการฝึก Balance, Endurance, Strength, Agility, Mobility หรือ Functional เพื่อพัฒนากายได้อย่างหลากหลาย
- สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลเป็น PDF Report ได้



Active Balance Kit



Functional Kit




WALKER VIEW 3.0 - SCX



ลู่วิ่งสำหรับฝึกและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของการเดิน และการวิ่งพร้อมวิเคราะห์ผล

- กล้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Motion Analysis)
- แผ่น Load cell สำหรับประเมินแรงกดเท้าขณะเดินหรือวิ่ง, ช่วงก้าว (Step length) หรือการลงน้ำหนักของเท้าทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น
- ประเมินผลและแสดงผลแบบ real time
- แสดงค่าตัวแปรมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ เช่น ลำตัว ข้อเข่า ข้อสะโพก หรือข้อเท้า เป็นต้น และตัวแปรอื่นๆ ที่ช่วยประเมินการเดินและการวิ่ง
- มีโปรแกรมสำหรับประเมินด้วย Protocol มาตรฐานสากล เช่น Cooper Test , Balke หรือ 6 minutes walk test

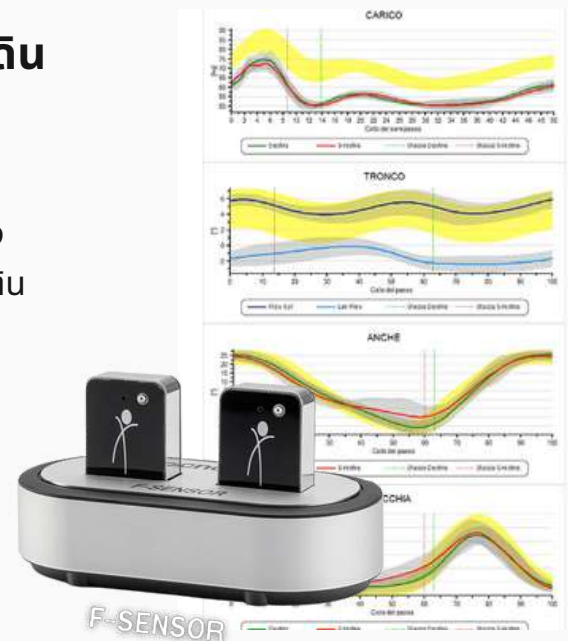

**AUTOMATICAL
Speed Control**



**POSTURAL ANALYSIS
Gait&Running**




**3D MOTION
Realtime Feedback**





เครื่องฝึกและประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบแรงต้าน แสดงภาพเสมือนจริง พร้อมระบบวิเคราะห์ผล

- กล้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Motion Analysis)
- แผ่น Force Plate พร้อมโปรแกรมสำหรับการประเมินการทรงตัวหรือแรงกดเท้า
- เพิ่มแรงต้านด้วยระบบปั๊มลมสุญญากาศ
- ประเมินผลและแสดงผลแบบ real time แสดงค่าตัวแปรมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ เช่น ข้อไหล่ ลำตัว หรือ ข้อเข่า เป็นต้น
- มีโปรแกรมสำหรับฝึกความแข็งแรง ที่สามารถออกแบบโปรแกรมการฝึก เพื่อให้สามารถติดตามผลได้อย่างแม่นยำ

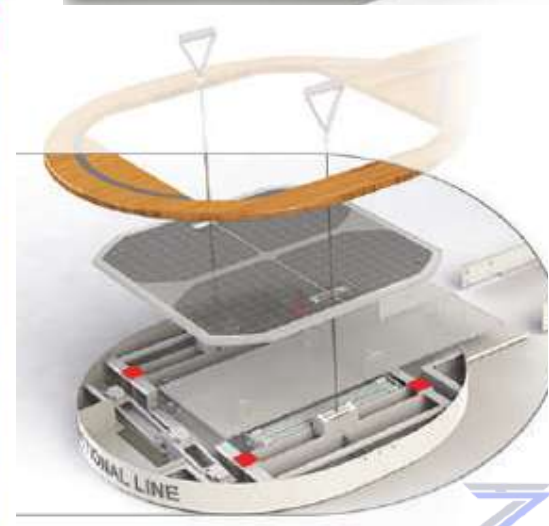



Telerehabilitation

From the sub-acute phase to functional re-education, Homing® takes you to a new dimension of health

Continuity of care

A solution of continuity for treatment, chronic conditions and unexplored areas of intervention.

APA

Adapted physical activity, prevention and maintenance, for an experience of movement beyond treatment.




3D MOTION



MARKERLESS



COMPLETE KIT

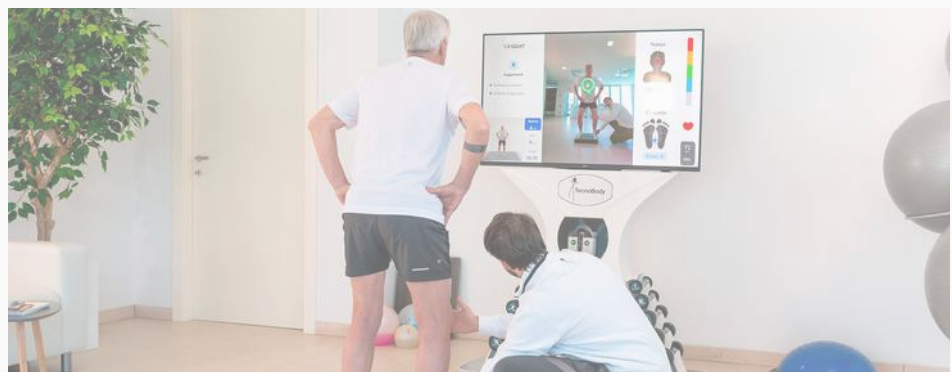

FUNCTIONS




MONITOR - ANALYSIS



EXERCISE LIBRARY / PROGRAMS



REGISTRY - MEDICAL RECORDS

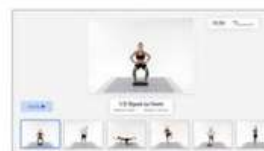

FUNCTIONAL EXERCISES



VIRTUAL REALITY WALK and RUN.



EXERGAMES



YoRoller PRO

Flywheel Training device

สำหรับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก สามารถฝึกได้ทั้งการหดตัวแบบ Eccentric และ Concentric แบบ สามารถสร้างแรงต้านได้ดีตลอดการช่วงการเคลื่อนไหว

ปรับระดับความหนักและความยาวของสายเคเบิลได้ตามความเหมาะสม สามารถประยุกต์ในท่าออกกำลังกายทั้งแบบ Resistance training หรือผสมผสานกับท่าออกกำลังกายเฉพาะกีฬาได้หลากหลายรูปแบบ



Ergonomic Grip




Two Hand Grip



Cuff



Social Media Adapter

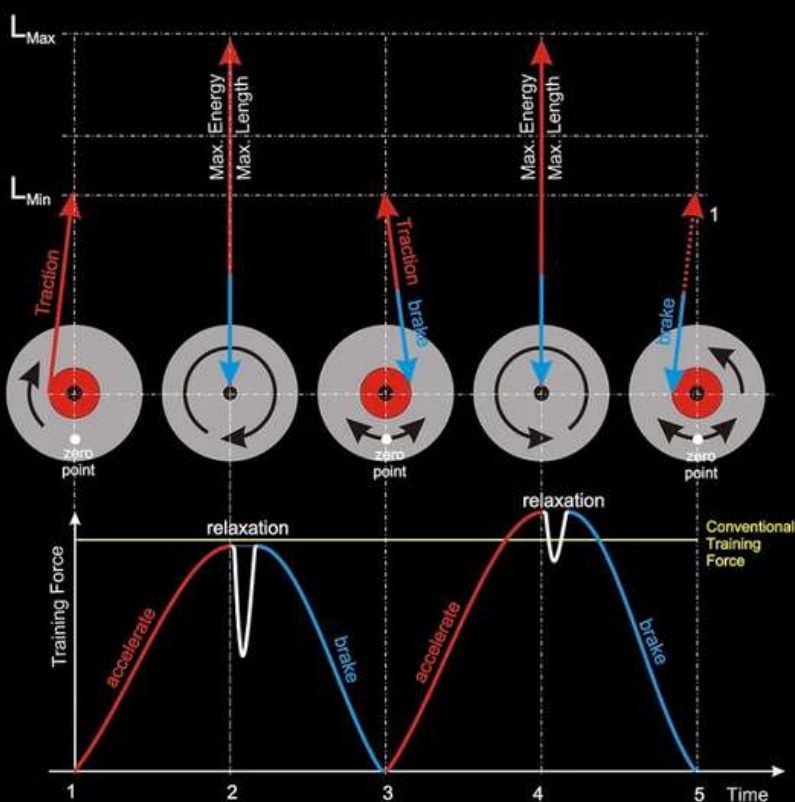

Training with flywheel technology

Training with centrifugal force in the form of kinetic energy is an innovative development in the field of sports and physiotherapy. Instead of traditional weights, you train with flywheels that work independently of gravity. Every movement occurs in two phases: concentric phase and eccentric phase

Phase 1 - Concentric Movement

By investing muscle energy to pull the handle and accelerate the flywheels, they store kinetic energy. Once the strap is fully unwound, the drawstring reaches its maximum length, creating a "point of return" where the drawstring reverses direction and begins to coil, like an inverted yo-yo. Depending on body tension and training style, the amplitude and speed of the "point of return" can be used as a longer or shorter "relaxation" of the muscles.

Phase 2 - Eccentric movement

As the band begins to wind up, it is slowed down by muscle force. The eccentric phase begins instinctively. The person who trains cannot remain passive. It is pulled by the stored kinetic energy with almost the same energy that it put into turning the flywheels and has to brake them. This reaction is instinctive. This phase lasts until the tension band has reached its shortest length and the flywheels are braked at zero speed. A new cycle is initiated by the action of new concentric traction.




Infrashape Horizontal

Horizontal vacuum recumbent bike

VacuActiv

Underpressure

Generated by a specially designed vacu pump, which increases several times the efficiency of each training session.

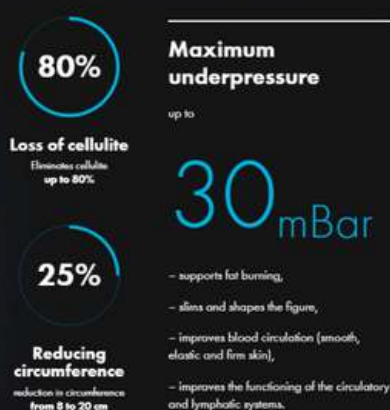

Infrared IR

Modern radiators provide the full spectrum of infrared radiation IR-A, IR-B and IR-C. They deliver healing thermal radiation directly to the deep subcutaneous layers. In this way, they accelerate the metabolic process, dilate blood vessels, improve blood flow and oxygenate tissues.



Comparison of a 30 minute workout

Infrashape Horizontal

Regular bike



Multivision user interface

The Multivision interface was created for demanding users who value technology and modern solutions. Multivision software offers a lot of functions and a virtual run that displays the recorded route and synchronizes with the training, diversifying the time spent while exercising.

Redesigned front panel

Large touch display
15,6"

Colortherapy

Virtual run

Multivision

Recommended for places

Future fitness studios





Specification

Size	Height	123 cm (48,43 inches)
	Width	117 cm (46,06 inches)
	Length	241 cm (94,88 inches)
Weight	190 kg	
Power supply	230VAC / 50Hz / 1PH 110VAC / 50Hz / 1PH	
Power consumption	2 KW	
Infrared temperature	25-50°C	
Electric adjustable backrest angle	Yes	
Adjustable bike resistance	Yes	
Under pressure range	0-30mBar	
Touch display size	15.6-inch	



- FEATURES -



Wearable VO2
Indoors or outdoors



Live data display
Free app download



Accurate
and
repeatable



Connect Bluetooth
sensors



Sanitary for multiple
users



4+ hours on a
single AAA battery



THE FUTURE OF VO2 IS HERE

VO2 is a simple measurement based on a complex physiologic system of oxygen supply and demand. The term VO2 refers to the Volume of Oxygen consumed by the body at any given intensity. The number value given by the VO2 Master represents the amount of oxygen used by the working muscles during exercise.



THE ULTIMATE PORTABLE VO2 ANALYZER



You can now take the most sophisticated physiologic measurements outdoors to collect data in a more meaningful way.



PERFORMANCE TESTING



Regular performance assessments ensure efficient planning for consistent improvement in any sport.

Accurately determine training zones
Track economy, efficiency, VO₂ Max
Measure Rf, Tv, Ve, FeO₂, VO₂, EqO₂



RESTING METABOLIC TESTING



The safest and most effective way to manage weight is by measuring energy balance to create a nutritional plan conducive to weight gain, loss, or maintenance.

Individualized, safe nutritional
planning

Determine daily caloric expenditure
and consumption needs



GUIDED APP PROTOCOLS



Free phone app guides you through customizable testing protocols, and generates a personalized PDF report.



Step Test



RMR



Intervals



5-1-5



MEASURE EVERYTHING

VO2

VO2 Master

Heart Rate

Power

MO2

Muscle Oxygenation

GPS

Speed and Cadence



VM Pro can be used to gain interesting and applicable knowledge about the cardiac, respiratory and muscular systems.

Please visit our website for more information | WWW.VO2MASTER.COM

STATSports®



APEX TEAM SERIES



The most advanced athlete performance-tracking device

STATSports' revolutionary Apex, launched in 2017, is the most advanced athlete performance-tracking device ever released.

Apex integrates the latest technologies on the market, including; Augmented 10Hz GNSS, 952Hz Accelerometer and Bluetooth LE to create the most powerful and accurate tracking device on the market.

260+ Metrics including

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| 📍 Total Distance | 📍 Equivalent Metabolic Dist | 📊 Current Speed | 📊 Speed Intensity |
| 📊 Meters Per Min | 📍 Z4-Z6 Distance | 📊 Max Speed | 📊 Fatigue Index |
| 📊 HMLD | 📍 Zone 4 Distance | 🏃 No. of Sprints | 💓 Current Heart Rate |
| 📊 HMLD Per Min | 📍 Zone 5 Distance | 📊 Accelerations | 💓 Max Heart Rate |
| 📊 HSR | 📍 Zone 6 Distance | 📊 Decelerations | 💓 Avg Heart Rate |
| 📊 HSR Per Min | 📍 Z5-Z6 Entries | 📊 Step Balance | ⚠️ Red Zone |
| 🏃 Sprint Distance | 📍 Zone 5 Entries | 📊 DSL | 💓 Heart Rate Exertion |
| 📊 Explosive Distance | 📍 Zone 6 Entries | 📊 Impacts | |
| 📊 Average Metabolic Power | | | |



tobii


EYETRACKING



reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021

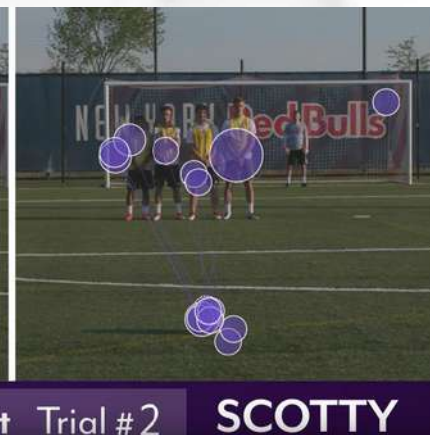

Best-in-class technology



Reliable eye tracking across the population regardless of eye color or shape



Slippage compensation and persistent calibration for consistently strong data



Patented 3D eye model and two cameras per eye ensures accurate gaze data



Accelerometer, gyroscope, and magnetometer differentiate head and eye movements



HIGH CARE[®]
MEDICAL

Vascular medical
technology from space

VACUMED
FLOW REGENERATION SYSTEM



Intermittent vacuum therapy

Origin in space medicine


Vascular diseases are among the highest cost centres in the health care system.
Incidences are rising and the quality of life of those affected continues to decline with increasing age.

The Intermittent vacuum therapy -IVT- has its technological origin in space medicine. In the absence of gravity (weightlessness), astronauts in space must under negative pressure application in an LBNPD (Lower Body Negative Pressure Device) every ten hours to avoid orthostatic complications due to an insufficient baroreflex; this is the only way to ensure sufficient blood flow in the periphery.



The further development of the LBNPD is the innovative VACUMED[®] Flow Regeneration System. The procedure was developed by Weyergans High Care AG together with the Institute of Space Medicine of the German Aerospace Center (DLR).

- △ เพิ่มการไหลกลับของเลือดเข้าสู่หัวใจ (Venous reflux)
- △ กระตุ้นการไหลและการระบายน้ำเหลือง

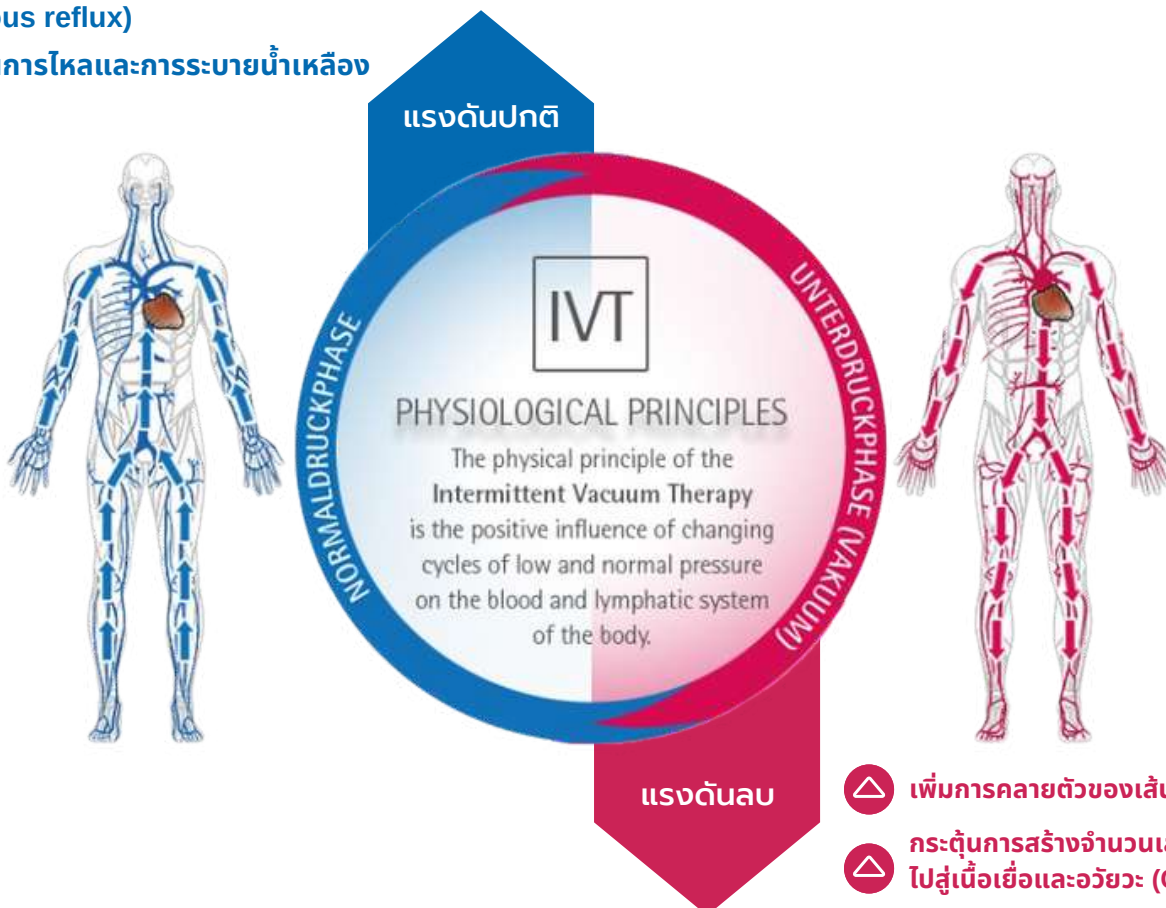

- △ เพิ่มการคลายตัวของเส้นเลือดฝอย
- △ กระตุ้นการสร้างจำนวนเส้นเลือดฝอยไปสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะ (Capillarization)
- △ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนเลือดและระบบกล้ามเนื้อ





ผลจากการศึกษา วิธีการฟื้นฟูด้วยแรงดันสุญญากาศ (IVT) ให้ผลดังนี้

- กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ทำให้ออกซิเจนและสารอาหารไปสู่กล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ
- กระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เร่งการสมานแผลทุกชนิด โดยเฉพาะแผลจากโรคเบาหวาน (แผลที่เกิดจากเส้นเลือดฝอยอุดตันทำให้เนื้อเยื่อที่ขาดเลือด)
- ลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือการผ่าตัด
- ลดอาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกาย หรือปวดตะคริวตอนกลางคืน
- เสริมสร้างการทำงานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่สร้างความแข็งแรงและแรงยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ



ผลจากการศึกษา ผู้ป่วยเบาหวานที่เท้า จำนวน 82 คน ในการฟื้นฟูด้วย VACUMED สัปดาห์ละ 2-4 วัน/สัปดาห์ ความดันที่ -30 ถึง -40 mmHg ครั้งละ 20 นาทีพบว่า สามารถลดความดันเลือด กระตุ้นการเจริญของเยื่อบุผิว ลดอาการปวดได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจาก VACUMED ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและในหลอดเลือดฝอยไปยังแผล ช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและสมานแผล และลดโอกาสในการตัดอวัยวะจากแผลเบาหวานได้


Yespenbetova, M.Zh., N.S. Izatullayeva et al. (2016).

The analysis of efficiency of application of interval vacuum therapy on the device VACUMED in patients with diabetic foot infections

ผลจากการศึกษาผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมากและถุงน้ำที่รังไข่ จำนวน 67 คน พบว่า ภายหลังการผ่าตัดมักเกิดอาการแทรกซ้อน เนื่องจากการสะสมและการคลั่งของน้ำเหลือง ส่งผลให้ระบบน้ำเหลืองและไหลเวียนเลือดทำงานไม่เป็นปกติ และเกิดอาการแทรกซ้อนตามมา การฟื้นฟูผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดด้วยวิธี IVT สามารถประสิทธิภาพการทำงานของระบบน้ำเหลือง ระบบไหลเวียนเลือดและภูมิคุ้มกัน ลดระยะเวลาในการพักฟื้นและอาการแทรกซ้อนได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

Zellner, Frankfurt. (2015). [A.14]

Postoperative lymphatic congestion in Urology: intermittent vacuum therapy

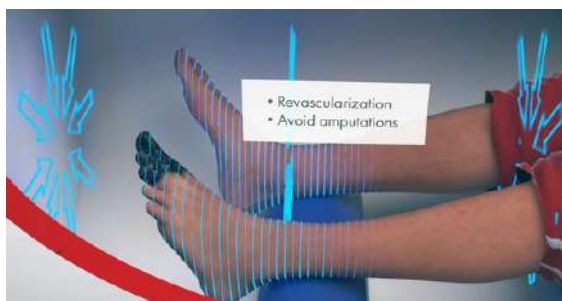

CRYOSCREEN *



อุปกรณ์ฟื้นฟูด้วยความเย็นเฉพาะจุด แบบพกพา

ช่วยในการกระตุ้นตัวรับรู้ความรู้สึกที่ผิวหนัง เพื่อส่งสัญญาณไปที่สมองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีการตอบสนองกลับผ่านทางระบบประสาทอัตโนมัติ (Reflex system) ให้ผลที่ได้จากการรักษา ดังนี้

- * บรรเทาอาการปวด
- * ลดกระบวนการอักเสบเฉียบพลัน
- * การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
- * ผลต่อระบบหลอดเลือด ช่วยในการระบายและลดการคั่งค้างของเลือด ที่จะทำให้เกิดการบวมได้



เหมาะสำหรับการรักษา

- 1 ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับข้อต่อและการอักเสบ
- 2 โรคเอ็นข้อศอกอักเสบ
- 3 การบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้อ
- 4 การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลัน
- 5 การคั่งค้างของเลือดและอาการบวม

บรรเทาอาการเจ็บปวดอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ความเย็นกระตุ้นระบบประสาท (NCS)

- สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางกล้องจับความร้อนที่จะแสดงผลบนหน้าจอ ทำให้ทราบอุณหภูมิของบริเวณที่ต้องการรักษาโดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
- อุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัด กำหนดเป้าหมาย และทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วในเครื่องเดียว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 นาที ที่ให้ผลต่อการรักษาเทียบเท่ากับการประคบด้วยน้ำแข็ง 20 นาที
- มีขนาดและน้ำหนักเบา สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ในทุกสถานการณ์ เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายและสามารถบันทึกภาพก่อน ระหว่างและหลังการรักษา เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นใจในการรักษา

** NeuroCryoStimulation (NCS) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการรักษาที่กำลังเป็นที่นิยมและทำให้การรักษาส่งผลดี ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ให้บริการรักษาสะดักสบายขึ้น อีกทั้งยังเหมาะกับการรักษาทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังด้วย





Hyperbaric OXYGEN Chamber

Original for home use

แคปซูลฟื้นฟูร่างกายด้วยออกซิเจนแรงดันสูง แบบเคลื่อนที่

สำหรับฟื้นฟูร่างกายด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ที่ 4PSI หรือ 1.3 ATA ช่วยเพิ่มปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในเลือดได้มากกว่าแรงดันปกติ เร่งการฟื้นฟูการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เร่งการสมานแผล กระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ผู้ที่นอนไม่หลับ ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น



Dimensions : Length 92"
Diameter : 21"
Compressed air : 1/4 Hp
Operating Pressure : 4 Psi (1.3ATA)
Weight : Bladder 11 kg.
Total weight : < 25 kg.



Dimensions : Length 88"
Diameter : 27"
Compressed air : 1/4 Hp
Operating Pressure : 4 Psi (1.3ATA)
Weight : Bladder 12 kg.
Total weight : < 26 kg.

VITAERIS320



Dimensions : Length 92"
Diameter : 32"
Compressed air : 1/3 Hp
Operating Pressure : 4 Psi (1.3ATA)
Weight : Bladder 16 kg.
Total weight : < 50 kg.



WORLD STANDARD

ได้รับรองมาตรฐาน US.FDA Class 2, GPM, CE และ Thailand FDA



THE ORIGINAL

เจ้าแรกที่ทำ mHBOT ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล



PORTABLE

สามารถเก็บใส่กระเป๋า และนำไปใช้นอกสถานที่ได้



HOMEUSE (1.3 APA / 4PSI)

สมาคมแพทยเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง USA อนุญาตให้สามารถใช้ Hyperbaric oxygen chamber แบบ Homeuse ได้ที่ระดับแรงดันไม่เกิน 1.5 APA

Portable Hyperbaric Chamber

สำหรับฟื้นฟูร่างกายด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ที่ 4PSI หรือ 1.3 ATA
 ช่วยเพิ่มปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในเลือดได้มากกว่าแรงดันปกติ เร่งการฟื้นฟูการบาดเจ็บ
 ของกล้ามเนื้อ เร่งการสมานแผล กระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง
 ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ผู้ที่นอนไม่หลับ
 ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น



SOLACE210®

Dimensions : Length 92"
 Diameter : 21"
 Compressed air : 1/4 Hp
 Operating Pressure : 4 Psi (1.3ATA)
 Weight : Bladder 11 kg.
 Total weight : < 25 kg.




RESPIRO270®

Dimensions : Length 88"
 Diameter : 27"
 Compressed air : 1/4 Hp
 Operating Pressure : 4 Psi (1.3ATA)
 Weight : Bladder 12 kg.
 Total weight : < 26 kg.



VITAERIS320®

Dimensions : Length 92"
 Diameter : 32"
 Compressed air : 1/3 Hp
 Operating Pressure : 4 Psi (1.3ATA)
 Weight : Bladder 16 kg.
 Total weight : < 50 kg.

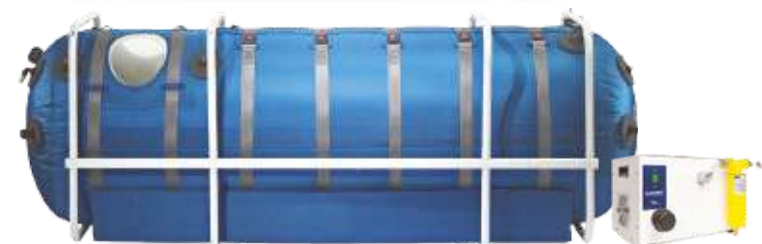

QUAMVIS420®

Dimensions : Length 100"
 Diameter : 32"
 Compressed air : 1/3 Hp
 Operating Pressure : 4 Psi (1.3ATA)
 Weight : Bladder 18 kg.
 Total weight : < 60 kg.



FORTIUS420®

Dimensions : Length 91"
 Diameter : 42"
 Compressed air : 1/3 Hp
 Operating Pressure : Up to 29 Psi (3.0 ATA)
 Weight : Hard Shell Chamber 570 kg.
 Total weight : < 600 kg.


**TESTING
HAS NEVER
BEEN SO
EASY**

MOBILE PRO
TIMING SYSTEM



TIMING PRO TESTYOU

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น ความเร็ว ความคล่องตัว
เวลาในการตอบสนอง ได้อย่างแม่นยำ
ติดตามผลได้แบบเรียลไทม์ผ่านทางแอปพลิเคชัน
สามารถบันทึกผลและ Export ข้อมูลเป็น PDF file ได้
เหมาะสำหรับการทดสอบสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว
เพื่อเพิ่มทักษะได้ในทุกชนิดกีฬา

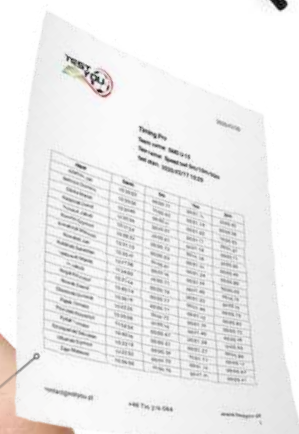

BE A CHAMPION
TRAIN YOUR BRAIN

BRAINPRO

TEST YOU



อุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเร็ว
ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
สามารถใช้งานอิสระหรือร่วมกับอุปกรณ์ฝึกชนิดอื่นได้
มีโปรแกรมการทดสอบ และการฝึกที่หลากหลาย
สามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกได้เองอย่างอิสระ
ช่วยเพิ่มทักษะในการเคลื่อนไหว ความคล่องแคล่ว
และความสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้

MOBILE APP FITTED TO YOUR NEEDS



specialty made
tests and trainings



BLUETOOTH low-energy
communication



instant
paring



test & training
creator



colourful
charts



FOCUS ON TRAINING LEAVE US THE REST

UNLOCK YOUR BRAIN'S FULL POTENTIAL

TESTYOU BRAIN gives you
unlimited training options



NEW TECHNOLOGY IN NORMAL LIFE



intelligent
RGB LEDs



16 mln
colours



automatic
light sensor



250
signs

TRAINING WITH TESTYOU BRAIN IMPROVES:

- decision time
- peripheral vision
- reaction time
- coordination
- speed
- agility
- learning ability
- and much more...



Pressure Plate

Light and portable device.
The most accurate and cost
effective way for
balance & pressure
assessment and
training.

PhysioSensing allows you
to evaluate your clinical
practice and make it
objective and quantified
in a clinical report.



Technology

- 1 cm² sensor
- 1600 sensors
- Baropodometric plate

+ Accessories

Carry Bag



Foam



40 x 40 x 8 cm
18 Kg/m³ density

✓ Compatible Software



Physiosensing
Balance Software



Physiosensing
Podo Software



sensingfu+ure

PhysioSensing Range Technology

1. Balance


Balance control consists of controlling the body center of mass over its limits of stability. Clinical balance assessment can help assess fall risk and/or determine the underlying reasons for balance disorders. The benefits of using force plates in balance assessment comes from their ability to measure center of pressure (CoP).

2. Comfortable stance with the eyes closed



3. Posturography

Computerized posturography systems utilize force platforms to measure the sway of a patient by determining the movements of the instantaneous Center of Pressure (CoP). The CoP data collected can be visualized through a statokinesigram and stabilogram.

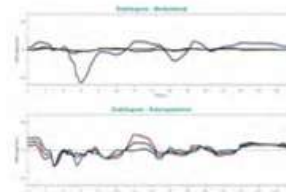


4. Virtual Reality

In the recent decade, Virtual Reality (VR) has become generally accepted as a therapeutic tool for neurological patients. VR involves real-time simulation and interactions between sensory, motor and cognitive channels. VR can be set up to be strongly immersive, in that the environment appears real and three-dimensional. VR provides an ideal environment to study the balancing strategies.



2. Feet Pressure Map

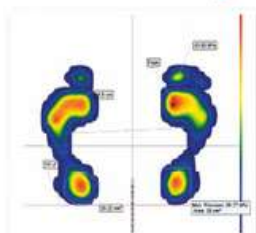

Foot Pressure Mapping is a method of measuring pressures on the surface of the foot during standing or walking. Static and dynamic baropodometric analysis are performed on a baropodometric platform, through which the pressure exerted by the feet from standstill and during walking is being measured.



5. Visual Biofeedback

Visual Biofeedback (VB) is a rehabilitation method that can be used during static balance training, offering the patient visual information on the position of the center of gravity within the range of stability as the patient stands on a plate. VB stimulates motivation, proprioceptive information to the patient, simulates the body movements and provides valuable information for the health professional.




Podo Software

Static and dynamic baropodometric analysis

Static & Postural Analysis

Analyze your plantar pressure map distribution in a single (static) image or during a defined time.



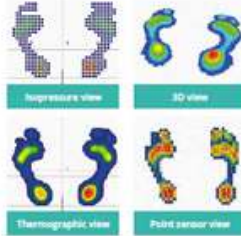


- Static mapping with center of pressure
- Max, Average pressure calculations
- Weight distribution
- Measuring possibilities (length, angle, pressure, area)
- Exam comparison
- Statokinesigram and Stabilogram




Dynamic Analysis

Analyze your plantar pressure distribution on the platform during a one or four gait cycle

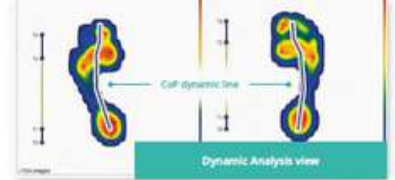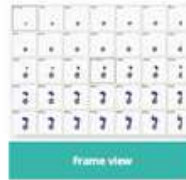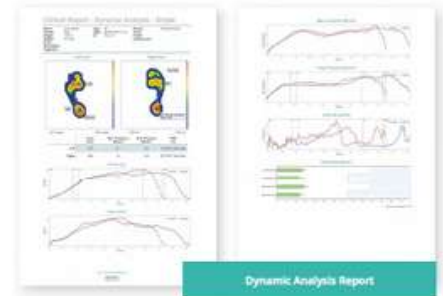

- Frame view
- CPEI
- CoP line
- Force, Area, Pressure, velocity Graphs
- PEAK risk
- Gait Cycle Phases

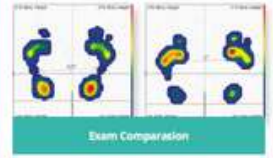

Compatible Plates



General Features

- Clinical Reports with normative Data
- Report
- Patient Management
- Database Export (Excel, PDF)

Balance Software

Powerful Balance assessment & training tool



Assessment

mCTSIB- Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance & Romberg Test
This protocol allows the static balance measurement in four sensorial conditions: stable surface and open eyes; stable surface and closed eyes; surface instable and eyes open and surface instable and eyes closed.

Body Sway

Use Body Sway to create a personalized posturography. Define initial conditions and obtain CoP variation, ML and AP variables over time. It also includes more than 30 parameters derived from a posturographic examination including Fourier analyses.

Limits of Stability LOS

Perhaps the most used protocol for balance assessment. This protocol quantifies the directional control and the maximum distance that the patient can reach with its center of pressure in 8 different directions.

Fall Risk

Use Fall Risk to measure the static balance in four conditions: comfortable stance with eyes open and eyes closed, narrow stance with eyes open and closed. After performing, the value of the sway velocity index appears and provides a fall risk prediction.

Rhythmic Weight Shift


Use the Rhythmic Weight Shift protocol to evaluate the transfer capacity of the center of pressure rhythmically in the sagittal and anteroposterior plane, at three different velocities.

Unilateral Stance

Use this protocol to measure the balance in four conditions: left foot lifted up with eyes open, left foot lifted up with eyes closed, right foot lifted up with eyes open and right foot lifted up with eyes closed.

Balance Error Scoring System

The BESS protocol allows the measurement of postural stability with eyes closed in three different positions on two types of surface (firm and unstable): two feet together, unipedal and tandem position.

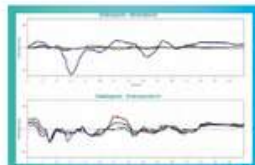

Balance improvement training

In the Sagittal and Anteroposterior exercises, the patient must reach the balance position in the sagittal plane or in the anteroposterior plane.



In the Spiderweb, Tunnel, Dots pattern and Bars pattern exercises the goal is to keep a balance position despite the visual stimulus.




In the exercises Route Bars, Route Spiral, Route Square and Route Maze the goal is to go through the routes within its boundaries with the center of pressure, following the red dots.



In the exercises Square, Circle, Eight and Spiral, the patient must reach all the dots disposed in the form indicated in the name.



In the Follow the Point and Moving Route exercises, the goal is to reach the moving red point and follow it within its tolerance margin.

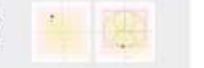

Compatible Plates



General Features

- Clinical Reports with normative Data
- Report
- Patient Management
- Database Export (Excel, PDF)



BRAYDEN^{PRO}

Improving CPR Quality

The Brayden Pro CPR training system is based on the Brayden manikin and the Brayden Pro training manikin to display blood circulation in the upper body. The Brayden Pro manikin can also be used as a Brayden manikin (with functioning blood circulation) when it is not connected to the Brayden Pro application.

BRAYDEN^{PRO}



Self training

Intuitive real time feedback enables self-training
- practice makes perfect.



Monitoring

Capable of monitoring 6 manikins at the same time
- provides cost and time effective training.



Assessment

Can be used for full CPR scenario assessment
- including use of an AED.

Multiple Debriefing possibilities

Brayden Pro provides multiple debriefing opportunities to help improve CPR performance.



Overall results

CPR performance review

- Provides a numeric score and pictorial summary of each CPR parameter measured against a theoretical perfect score to help highlight improvement needs
- Highlights performance metrics against each CPR parameter measured

Detailed results

CPR in-depth analysis

- Presents detailed quantitative analysis for all relevant CPR metrics to provide an in-depth summary of performance
- Identifies performance over time and associated effect on CPR quality

Detailed results

Performance Summary

- Provides relevant information for each measured CPR parameter to help improve performance

Detailed results

Results by CPR cycle

- Provides an analysis of CPR performance for each measured CPR parameter for each cycle of CPR performed

Brayden Pro : the complete CPR training solution

Brayden Pro is easy to set up and use and provides a wealth of relevant information to help improve CPR performance.

- Free download app via Android "Play store"
- Can be used on commonly available Android devices
- Bluetooth technology offers reliable connectivity

- 6 manikins can be connected to 1 Android device
- Provides various training modes to meet your needs (1 or 2 resuscitation, compressions only, ventilations only)

Easy to set up and use

Intuitive real-time feedback

Multiple debriefing modes

Data can be easily accessed / exported

- Manikin firmware can be remotely updated via the app
- Automatic diagnostic self-checking capability
- Light and portable with an easy to carry bag

- Records can be stored and easily exported via email or social media
- Numeric data can be accessed for easy analysis via MS excel

INNOSONIAN



Brayden Pro provides real time feedback of key CPR parameters which can be reviewed, analysed and exported to help improve the quality of CPR performance.





TKK.5001 **GRIP A**

ANALOG GRIP
เครื่องวัดแรงบีบมือแบบเข็ม



TKK.5401 **GRIP D**

DIGITAL GRIP
เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิทัล



TKK.5002 **BACK A**

ANALOG BACK&LEG
เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบเข็ม



TKK.5402 **BACK D**

DIGITAL BACK&LEG
เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบดิจิทัล

PHYSICAL FITNESS TEST

World's leading manufacturers of measuring instruments for fitness testing



TKK.5403 **FLEXION D**

DIGITAL ANTEFLEXION
เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า



TKK.5412 **LS-ANTIFLEX**

LONG SEAT ANTEFLEXION
เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า (แบบนั่ง)



TKK.5803 **SIT&REACH**

CHAIR ANTEFLEXION METER
เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าดิจิทัล (แบบนั่งงอตัว)



TKK.5404 **EXTENSION D**

DIGITAL BACK-FLEXMETER
เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลัง



TKK.5710m **LEG CHAIR**

LEG MUSCLE STRENGTH
เก้าอี้ทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา



TKK.5505 **SIT-UPS**

ABDOMINAL ENDURANCE
เครื่องทดสอบแบบซิกอัพ





TKK.5011a LANGE SKINFOLD CALIPER

เครื่องวัดความหนาไขมัน ได้ผิวหนัง

TKK.11511 POCKETABLE SPIROMETER

เครื่องวัดความจุปอดแบบเข็ม



PHYSICAL FITNESS TEST

World's leading manufacturers of measuring instruments for fitness testing



TKK.5406 JUMP MD

VERTICAL JUMPMETER
เครื่องวัดการกระโดดสูง



TKK.5414 JUMP DF

VERTICAL JUMPMETER
เครื่องวัดการกระโดดสูง



Vertical jump testing
Measuring vertical jump height
Simple mechanical design
Easier than ever



TKK.5407c BALANCE-1

BALANCE ABILITY
เครื่องทดสอบการทรงตัว
ขณะยืนขาเดียว แบบ 1 สถานี



TKK.5407a BALANCE-3

BALANCE ABILITY
เครื่องทดสอบการทรงตัว
ขณะยืนขาเดียว แบบ 3 สถานี



InBody

Blood Pressure Monitor

InBody BPBIO 750

Automatic Blood Pressure Monitor For Professionals

The BPBIO 750 is an accurate, fully automated and easy-to-use blood pressure monitor. The measurement posture correction with moving cuff and moving elbow sensor, guide display for easy self-measurement and the ergonomic structure for measuring both left and right arms allows you to be in the ideal position for testing.



Smart Interface

Easily measure blood pressure by following the guide display without a medical personnel.



Large screen

Excellent visibility for systolic blood pressure, diastolic blood pressure and pulse rate.



Moving Cuff

The moving cuff helps correct placement of the arm.



Irregular Pulse Wave Detection

Conveniently Measure Both Arms with the Ergonomic Design




Automatic Power Saving

Enters sleep mode when waiting for more than 2 minutes.

Ergonomic design for measuring both left and right arms



InBody Technology

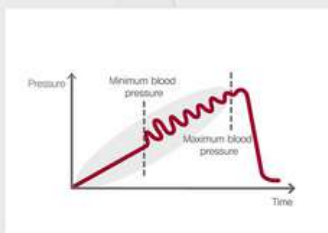

Inflationary Oscillometric Method

Allows personalizing the amount of pressure applied to the user's upper arm, so the user may feel less pain while measuring.



Moving Cuff & Moving Elbow Sensor

Induce correct posture for accurate measurement.

